

Срок гарантии составляет 1 год с момента продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.

В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному на дату приобретения.

Изделие предназначено для личного пользования. Использование изделия в коммерческих целях является основанием для снижения срока гарантийного обслуживания вдвое.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушение правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию изделия вносились изменения;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объёмы посторонних предметов;

Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона.

При обнаружении в товаре недостатков доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю производится в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" при условии сохранения товарного вида, потребительских свойств, упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара производится по адресу компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем, согласовывается с покупателем в рамках требований закона "О защите прав потребителей" и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом".

Наименование товара _____

Компания – продавец _____

Адрес продавца _____

Тел. Продавца _____

Дата покупки _____

М.П. _____ (подпись).


Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией «Нордбасс».

Адрес:

Москва, Ленинградский пр-т, д. 34 ; т/ф:(495) 730 51 41

Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д. 10; т/ф:(812) 329-11-91

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 .

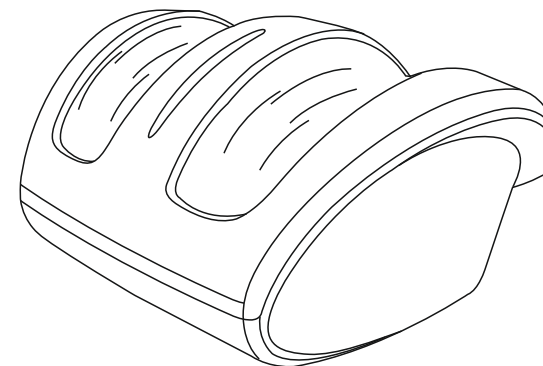

Массажер для ног

RT1800

Благодарим Вас за приобретение массажера для ног RT-1800.
Перед использованием массажера обязательно прочитайте
руководство пользователя и следуйте ему.

► Содержание

Меры предосторожности	1
Описание массажера	3
Внешняя структура массажера	3
Внутренняя структура кресла	4
Контрольная панель	4
Описание функций	5
Использование массажера	6
Уход и хранение массажера	7
Устранение неисправностей	8
Техническая спецификация	9

► Техническая спецификация

Название: Массажер для ног
Модель: RT-1800
Мощность: 72 Вт
Напряжение: 220 В



► Устранение неисправностей



№.	Проблемы во время использования кресла	Причины	Решения
1	Шумы во время использования	Воздушные подушки заполняются воздухом/сдуваются	Нормально, не препятствует выполнению функций
2	Массажер для ног не работает	Вилка не подключена к розетке	Пожалуйста, проверьте место подключения к розетке
		Клавиша Включения/Выключения находится в положении Выкл.	Нажмите на клавишу на боку прибора и установите в положение Вкл.
3	Поврежден провод питания		Прекратите использование и обратитесь в сервисный центр

Если описанные выше способы не помогают, обратитесь в сервисную службу официального дилера.




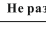
► Меры предосторожности

- Перед использованием массажера внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.
- Следуйте мерам предосторожности во время использования массажера.
- Обращайте повышенное внимание на текст со значками “Осторожно” и “Внимание”.

	Осторожно!	Возможно получение травм.
	Внимание!	Возможна поломка прибора.





	Запрещено. Запрещено самостоятельно разбирать и чинить прибор.
	Обязательно следуйте инструкции. Отключите массажер от розетки.

Внимание

	<p>При наличии следующих условий и заболеваний перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Людям, использующим кардио стимуляторы.</td> <td>4. Женщинам во время беременности.</td> </tr> <tr> <td>2. Людям, которым врач запретил использование массажера.</td> <td>5. Людям, болеющим остеопорозом.</td> </tr> <tr> <td>3. Людям с заболеванием сердца, опухолями.</td> <td>6. Людям с заболеваниями кожи.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Людям с повышенной температурой тела (выше 38 градусов).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8. Женщинам в период менструации.</td> </tr> </table>	1. Людям, использующим кардио стимуляторы.	4. Женщинам во время беременности.	2. Людям, которым врач запретил использование массажера.	5. Людям, болеющим остеопорозом.	3. Людям с заболеванием сердца, опухолями.	6. Людям с заболеваниями кожи.		7. Людям с повышенной температурой тела (выше 38 градусов).		8. Женщинам в период менструации.
1. Людям, использующим кардио стимуляторы.	4. Женщинам во время беременности.										
2. Людям, которым врач запретил использование массажера.	5. Людям, болеющим остеопорозом.										
3. Людям с заболеванием сердца, опухолями.	6. Людям с заболеваниями кожи.										
	7. Людям с повышенной температурой тела (выше 38 градусов).										
	8. Женщинам в период менструации.										
	Не позволяйте людям с ограниченными возможностями использовать массажер без присмотра.										
	Не позволяйте детям играть с массажером.										
	Только один человек может использовать массажер одновременно.										
	Если электрический провод питания поврежден, немедленно выключите прибор и обратитесь в сервисную службу.										
	Не ломайте, не перекручивайте и не дергайте за провод.										
	Не используйте совместно электрическое одеяло или др. приборы.										
	Разбирать, чинить и ремонтировать массажер может только официальный сервисный центр, в противном случае гарантия на прибор аннулируется.										

► Меры предосторожности

Внимание

 Обязательно!	Установленная длительность массажной программы составляет 10 минут.
	Не ставьте на прибор тяжелые предметы.
	Не накрывайте прибор одеялом или подушкой, если он находится в работающем состоянии.
	Вынимайте провод из розетки держа только за вилку, не дергайте за провод.
	Подключайте массажер только к сети 220 вольт, в противном случае может произойти поломка прибора.
	Перед использованием проверьте прибор на предмет повреждений. Если Вы заметите, что прибор поврежден, немедленно обратитесь в сервисную службу дилера.
	Не нажимайте кнопки контрольной панели с излишней силой, мокрыми руками, а также не кладите на панель никакие предметы.
	Не используйте данный массажер в медицинских целях.
	Не используйте другие терапевтические и массажные приборы совместно с массажером.
	Если во время массажа Вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите использование массажера и обратитесь к врачу.
Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью и на улице.	
Всегда после использования массажера и перед его очисткой, вынимайте провод из розетки.	
 Запрещено!	Чтобы не испытывать дискомфорт, не используйте прибор сразу после еды.
	Не спите во время сеанса массажа.
	Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
	Пожалуйста, при чистке обивки не используйте чистящие средства, спиртосодержащие средства, а также бензин, растворитель, керосин и т.д.
 Отключить от розетки!	Не садитесь на массажер.
	Не курите во время сеанса массажа.
 Отключить от розетки!	Перед тем как протирать массажер, выньте провод из розетки. Не вынимайте провод и не протирайте массажер мокрыми руками.
	Если Вы не используете прибор, выключите его и выньте провод из розетки.

► Уход и хранение массажера

Уход за массажером

- Перед очисткой массажера и его пластиковых частей, смочите тряпку в теплой воде и тщательно отожмите ее, после этого протрите сухой тряпкой.
- Для чистки контрольной панели используйте только сухую тряпку.



Внимание

Перед очисткой прибора, убедитесь, что он отключен от розетки. Не протирайте мокрой тряпкой блок питания и панель управления. Не выключайте массажер из розетки мокрыми руками. Не используйте для чистки спирто и бензиносодержащие жидкости, а также химические реагенты.

Хранение

После использования массажера, вытрите пыль с него, и отключите от розетки. Если вы планируете долго хранить прибор, накройте его чехлом.



Внимание

- Не храните массажер в местах попадания прямых солнечных лучей и в местах с высокой температурой, это может повредить прибор.

Помните

Перед тем, как использовать массажер, необходимо проверить:
 Не пахнет ли горелым.
 Не выключается ли прибор, если вы дотрагиваетесь до провода.
 Не нагревается ли провод.
 Другие неисправности.



Внимание

Немедленно прекратите использование массажера, если обнаружен хотя бы один признак неисправности. Немедленно отключите прибор от розетки и обратитесь к дилеру для ремонта массажера. Внимание! Только официальный дилер может ремонтировать прибор. Если ремонт будет производиться самостоятельно, либо человеком не относящимся к дилеру, гарантия будет не действительна.

► Использование массажера

Использование массажера

- ▶ Ставьте массажер на ровную поверхность.
- ▶ Располагайте массажер на расстоянии не менее 1 метра от аудио-видео аппаратуры и компьютеров.

Шаг 1:

Подсоедините провод массажера к розетке



Внимание

- ▶ Перед тем как подключить прибор к розетке, убедитесь, что провод не поврежден.
- ▶ Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.

Шаг 2:

- ▶ Установите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, находящуюся на задней части массажера в положение ВКЛ.. Индикатор на контрольной панели начнет мигать.

Шаг 3:

- ▶ Подберите удобное по высоте для себя кресло или стул, поставьте массажер рядом с креслом и разместите в нем ноги.



Внимание

- ▶ Перед использованием массажера снимите с ног все украшения, они могут нанести травмы.
- ▶ Не подпускайте детей к массажеру.

Шаг 4:

- ▶ Выберите желаемую массажную программу на контрольной панели

После массажа

Нажмите кнопку ВЫКЛ, находящуюся на задней части массажера. Выньте вилку из розетки.




Внимание

- ▶ Перед тем, как перемещать массажер, выключите его и отключите от питающей розетки.
- ▶ Покрытие пола может быть испорчено массажером. Рекомендуется подстелить ковер под массажер для защиты покрытия пола и снижения звука работы.

► Описание массажера

Внешняя структура массажера

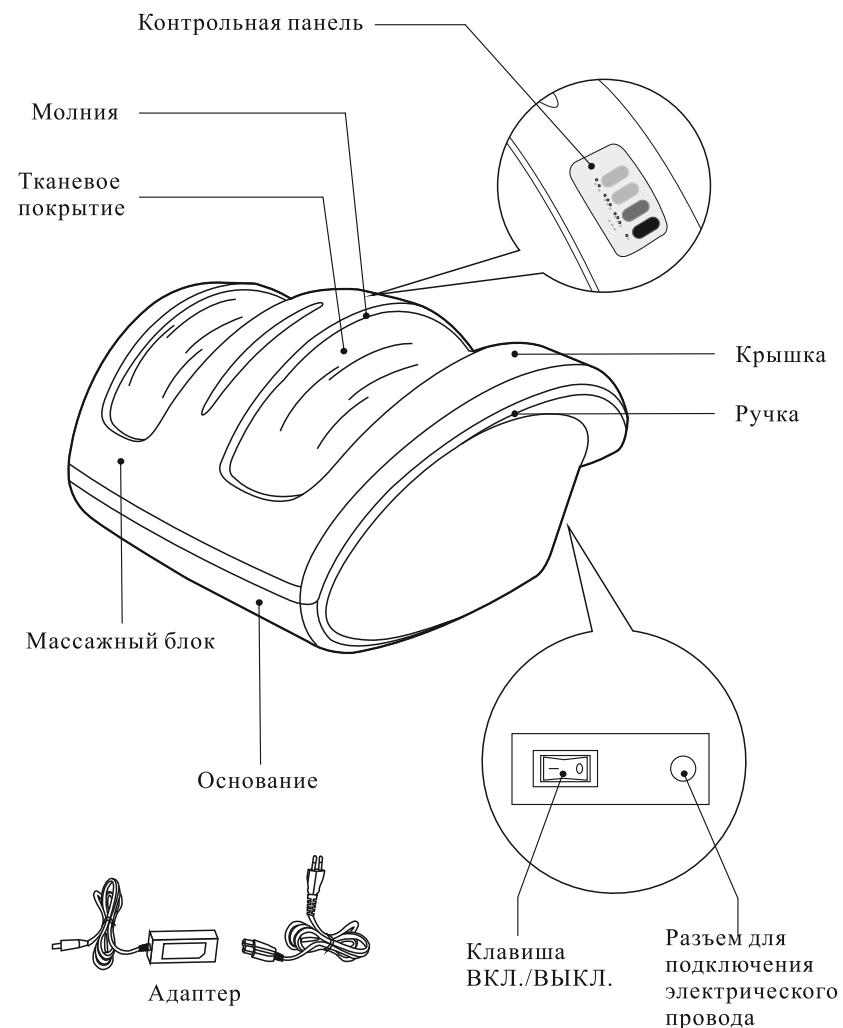


► Описание массажера


Внутренняя структура массажера

Блок для массажа
верхней части стопы

Массажные ролики
для стоп

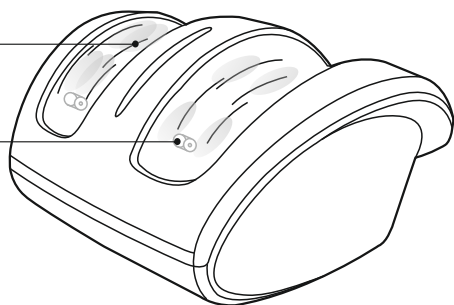

Контрольная панель

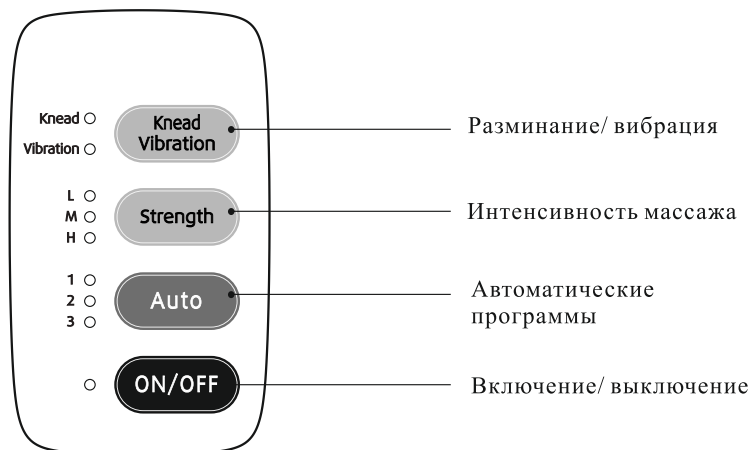

► Описание массажера

Описание функций

Knead
Vibration

Кнопка разминание/ вибрация

После включения прибора нажмите данную кнопку один раз для выбора функции разминание + вибрация, нажмите кнопку второй раз, чтобы включить только разминание, третье нажатие кнопки включит функцию вибромассажа, четвертое - остановит функции разминания и вибромассажа. Индикаторы рядом с кнопкой отображают ту функцию, которая выполняется.

Strength

Кнопка выбора интенсивности массажа

В режиме работы выберите функцию разминания или вибромассажа, затем нажмите эту кнопку для выбора сильного (high), среднего (medium) или слабого (low) массажа. Индикаторы рядом с кнопкой отображают выбранный параметр.

Auto

Кнопка автоматических программ

В рабочем режиме нажмите кнопку для выбора одной из 3-х автоматических программ массажа. Индикаторы рядом с кнопкой отображают номер выбранной программы.

ON/OFF

Кнопка включения/ выключения

После того, как массажер будет включен (с помощью кнопки на задней стороне массажера) индикатор работы будет мигать. Нажмите эту кнопку и удерживайте в течение 1 секунды. Индикатор загорится и будет гореть. По умолчанию массажер начнет воспроизводить автоматическую программу 1 после начала работы. Нажмите кнопку повторно, чтобы остановить работу. Запрограммированная длительность массажа — 10 минут.