

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 1 года с момента продажи .

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки .

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.

В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец оставляет за собой право заменить изделие на новое , адекватное по стоимости неисправному на дату приобретения. Изделие предназначено для личного пользования. Использование изделия в коммерческих целях является основанием для сокращения срока гарантийного обслуживания до 1 года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях :

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушение правил эксплуатации
- механических повреждений изделия , следов воздействия химических веществ ;
- ремонтных работ , производимых не сервисным центром ;
- повреждений или нарушений нормальной работы , вызванных животными или насекомыми ;
- если в конструкцию изделия вносились изменения ;
- использования изделия не по назначению ;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов ;

Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона.

Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1

"О защите прав потребителей" при условии сохранения товарного вида, потребительских свойств, упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара производится по адресу компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем, согласовывается с покупателем в рамках требований закона "О защите прав потребителей" и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом".

Наименование товара \_\_\_\_\_

Компания – продавец \_\_\_\_\_


Адрес продавца \_\_\_\_\_

Тел. Продавца \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись).

Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией-продавцом.

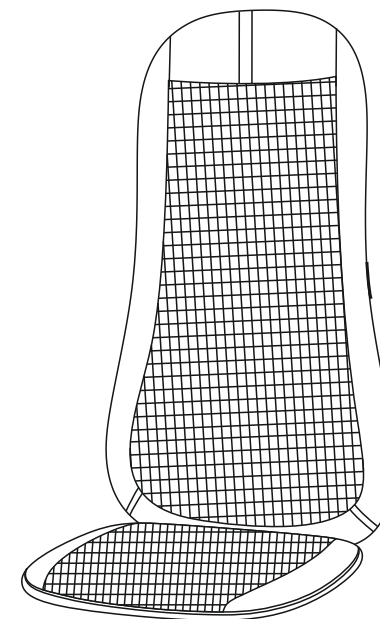

Спасибо что приобрели наш массажер. Перед использованием, пожалуйста прочтите данную инструкцию внимательно, обращая особое внимание на меры предосторожности, и информацию о том, как правильно использовать его.

## ▶ СОДЕРЖАНИЕ

---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ-----	1
НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ-----	3
Внешний вид-----	3
Конструкция изнутри-----	3
Управление-----	4
Кнопки пульта управления-----	5
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ-----	6
Метод использования-----	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ -----	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ-----	8
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ-----	9

## ▶ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

Название продукта: автомобильное массажное сидение

Номер модели: RT2138

Необходимая сила тока: 12 Вольт

Потребляемая мощность: 35 Вт

## ▶ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ





№.	Симптом	Возможная причина	Решение
1	Звуки механических циклических движений	Это нормально, продукт работает в нормальном режиме. Массажные головки соприкасаются с материалом обивки.	Это нормально. Никаких действий предпринимать не требуется.
2	Прибор не включается.	Отходит кабель питания.	Попробуйте подключить снова.
		Выключатель не включен.	Включите выключатель.
		Кабель питания не подсоединён.	Подключите кабель в розетку, как следует.

Если неисправности продолжают даже после принятых мер, пожалуйста обратитесь к ближайшему дилеру для исправления неисправностей. Пожалуйста проверьте не повреждён ли массажёр перед использованием.

## ▶ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▶ Пожалуйста, внимательно прочитайте меры предосторожности перед использованием продукта, для того, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию.
- ▶ Следование инструкции поможет вам правильно использовать данный продукт.
- ▶ Виды проблем и неисправностей, а также предостережения от неправильного использования расположены ниже.


	<b>ВНИМАНИЕ</b>	При неправильном использовании, пользователь может получить повреждения.	
	<b>ВНИМАНИЕ</b>	При неправильном использовании продукт может быть повреждён.	
	Показывает, что данное действие запрещено.		Показывает, что данный продукт не должен подвергаться разборке.

### Противопоказания


Проконсультируйтесь с доктором перед использованием данного продукта, если у вас есть что-либо из этого списка.

	<b>ВНИМАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Люди использующие электронные медицинские имплантаты помещённые в тело, такие как кардиостимулятор.</li> <li>◆ Люди, находящиеся под обследованием у врача, особенно те, кто чувствует себя некомфортно.</li> <li>◆ Люди имеющие злокачественные опухоли, сердечные расстройства, серьёзные заболевания.</li> <li>◆ Женщины в критические дни и при беременности.</li> <li>◆ Люди с остеопорозом и переломом позвоночника.</li> <li>◆ Люди имеющие повышенное кровяное давление.</li> <li>◆ Люди с заболеваниями и повреждениями кожи.</li> <li>◆ Люди с повышенной температурой (выше 38).</li> </ul>
---	-----------------	---

### Инструкция к пульту управления


	<b>ВНИМАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Не управлять пультом влажными руками.</li> <li>◆ Не давать пульту соприкасаться с жидкостями.</li> <li>◆ Не класть на пульт тяжелое.</li> </ul>
---	-----------------	--

### УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ




	<b>ВНИМАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Не использовать продукт когда окружающая температура превышает 40 градусов.</li> <li>◆ Не используйте продукт в пыльной или грязной среде.</li> <li>◆ Не использовать во время грозы. Отключать от сети во время грозы</li> <li>◆ Не использовать на открытом пространстве.</li> <li>◆ Использовать сидение на ровной поверхности.</li> <li>◆ Уберечь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.</li> </ul>
---	-----------------	--

## ► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЯ.

 <b>ВНИМАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Не использовать, если напряжение в сети не совпадает, это может привести к поломке и возгоранию.</li><li>◆ Не подключать кабель мокрыми руками.</li><li>◆ Удостоверьтесь, что подключаете кабель с правой стороны. Удостоверьтесь, что кабель не пережат.</li><li>◆ Не связывайте, не перегибайте или резко выдергивайте кабель.</li><li>◆ Используйте данный продукт только с подходящим адаптером.</li><li>◆ Если кабель поврежден, немедленно отсоедините его от розетки.</li><li>◆</li></ul>
--	--

### БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 <b>ОСТОРОЖНО</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Не ставьте тяжелые предметы на продукт.</li><li>◆ Не используйте данный массажер одновременно с другими устройствами.</li><li>◆ Этот продукт не является лечащим медицинским прибором.</li><li>◆ Только один человек может использовать продукт одновременно.</li><li>◆ Ограничения по весу пользователя 90кг.</li><li>◆ Не рекомендуется использовать, сразу после еды.</li><li>◆ Достаньте все жесткие предметы из карманов перед использованием.</li><li>◆ Если вам стало плохо, воздержитесь от использования.</li><li>◆ Рекомендуется использовать по 20 мин, каждый день.</li><li>◆ Не используйте массажер, если обнаружили повреждения.</li><li>◆ Пожалуйста, не сидите на самом краю массажера.</li><li>◆ Если внезапно отключилось электричество, пожалуйста отсоедините массажер от розетки.</li></ul>
 <b>ЗАПРЕЩЕНО</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Прекратить использование если есть визуальные повреждения или слышны посторонние звуки.</li><li>◆ Запрещено стоять на массажере.</li><li>◆ Запрещено давать детям играть с массажером</li><li>◆ Запрещено пользоваться массажером и во время сна.</li><li>◆ Запрещено пользоваться массажером в состоянии алкогольного опьянения.</li><li>◆ Запрещено засовывать пальцы внутрь массажера.</li><li>◆ Запрещено продолжать использование, если запахло горелым.</li></ul>
 <b>Запрещено разбирать</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Никто, кроме специалистов компании не должен разбирать или чинить данное устройство. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с вашим дилером.</li></ul>

## ► ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### Способы ухода

#### 1. Чистка

- ▶ Перед чисткой убедитесь, что массажер выключен и отсоединен от сети.
- ▶ Используйте мягкую ткань для протирания поверхности массажера.
- ▶ Используйте слегка влажную ткань для устранения загрязнений, после чего, протрите массажер насухо.

### **ВНИМАНИЕ**

- ▶ Не выдергивайте массажер из розетки мокрыми руками.
- ▶ Не используйте средства наподобие бензина для очистки массажера, иначе окрашенное покрытие может вытереться.
- ▶ Не разбирайте массажер когда он влажный / мокрый.

#### 2. Обслуживание

- ▶ Убедитесь, что кабель отключен от сети, перед началом обслуживания.
- ▶ Храните продукт в сухом месте .
- ▶ Если вы планируете долгое время не использовать массажер, уберите его в пылезащитный чехол. (в комплекте не идет)

### **ВНИМАНИЕ**

- ▶ При длительном воздействии прямых солнечных лучей, покрытие данного массажера может выгореть.

### Напоминаем

Если вы пользуетесь продуктом уже несколько лет, пожалуйста проверьте:

- ▶ Есть ли запах гари?
- ▶ Пошевелите кабель питания, не отходит ли он?
- ▶ Не светится ли кабель?
- ▶ Не поврежден ли он?
- ▶ Другие подозрительные вещи.

### **ОСТОРОЖНО!**

- ▶ Если обнаружено что-то из вышперечисленного, отключите устройство.
- ▶ Выключите его из розетки, и обратитесь к своему дилеру.
- ▶ Не пытайтесь разбирать массажер самостоятельно.

## ▶ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР:


- ▶ Проверьте товар на наличие повреждений.
- ▶ Разместите массажер на ровной поверхности сиденья или кресла, и закрепите специальными ремнями.
- ▶ Подсоедините адаптер к блоку питания, и подключите его в розетку. Когда кнопка ВКЛ/ВЫКЛ замигает, нажмите на нее и выберите программу, руководствуясь инструкцией к пульту управления.
- ▶ После использования, выключите массажер, и отключите кабель от сети.

### ⚠ ВНИМАНИЕ


- ▶ Массажный механизм данного продукта имеет функцию защиты от перегрузки, когда массажер перегружен, защитная система издаст звук «ЮКА-КЕЙ!» (звук неисправности) В этом случае, снизьте нагрузку на массажер, и он заработает в нормальном режиме.
- ▶ По умолчанию массажная программа длится 20 минут, она автоматически завершится, когда время выйдет. Вы можете выключить программу в любое время кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ
- ▶ Пожалуйста не используйте массажер лежа, он должен находится в сидячем положении.
- ▶ Не перегружайте массажер.
- ▶ Не давайте детям играть с массажером, они могут пораниться.

## ▶ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ

### Внешний вид.

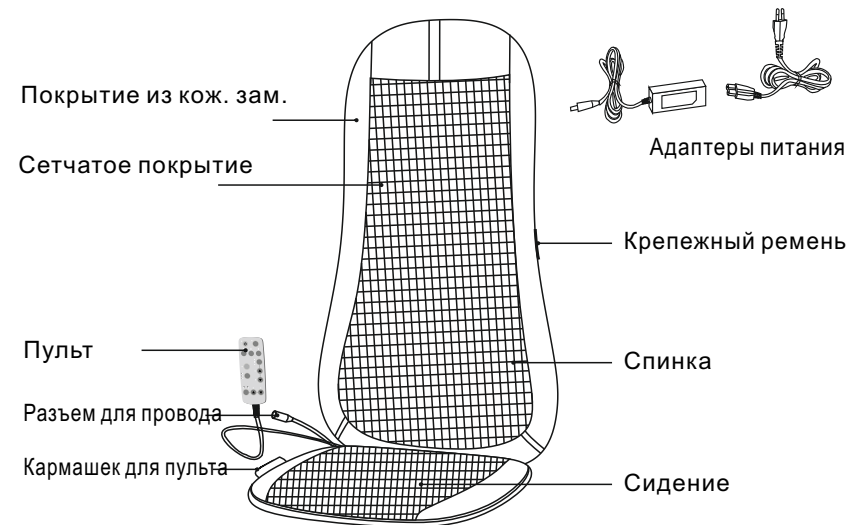


### Внутренняя структура

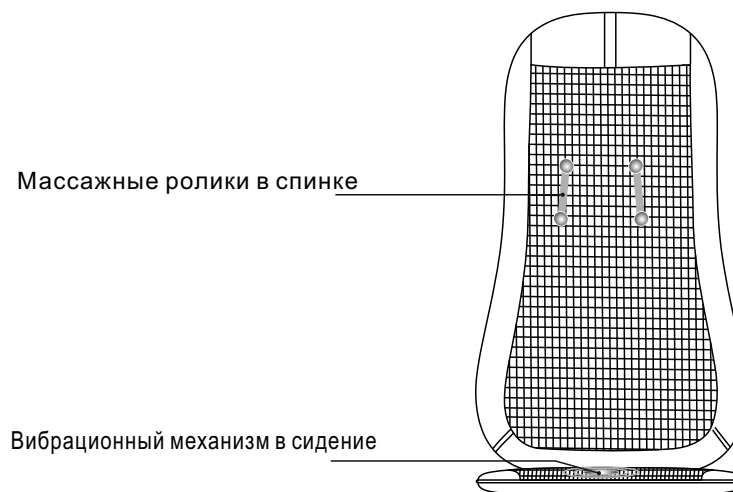

## ▶ Название и назначение каждой кнопки.

### Пульт управления

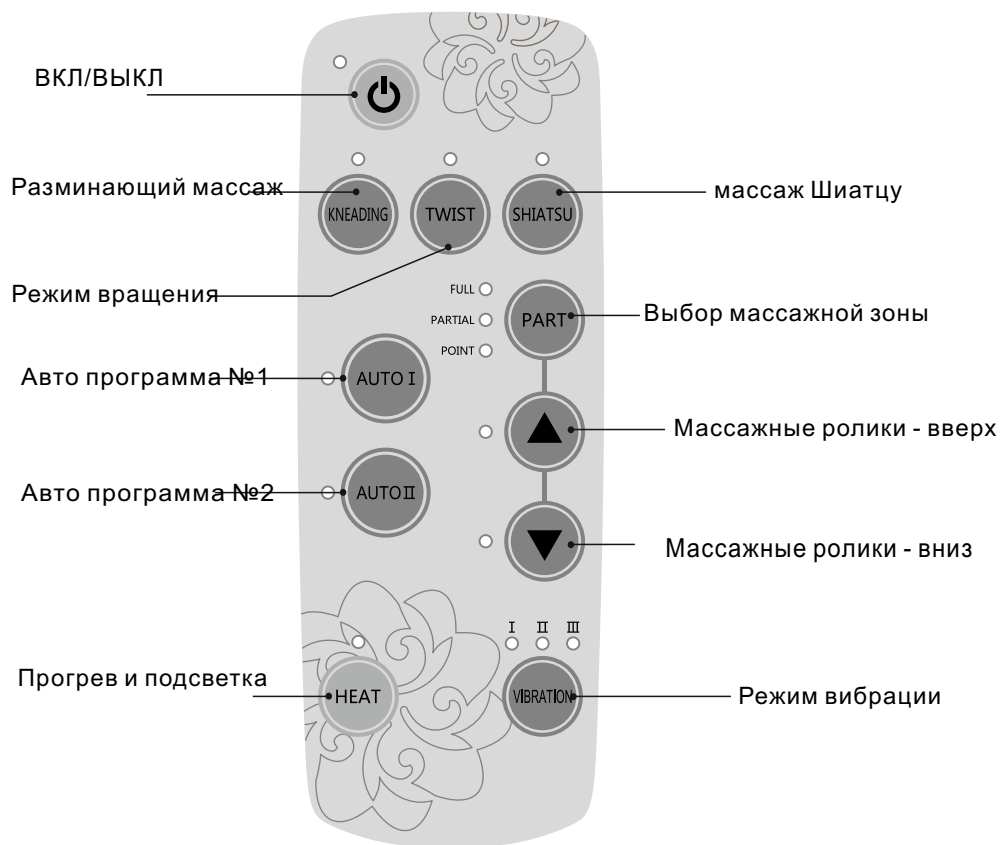












### ⚠ Внимание

- ▶ Не берите пульт мокрыми руками.
- ▶ Не проливайте на пульт жидкости.

## ▶ Название и назначение каждой кнопки.

### Инструкция к кнопкам пульта

-  Включает/выключает массажер. Нажатие на кнопку запускает автоматическую программу №1, соответствующая подсветка загорится. Повторное нажатие выключает программу. Кнопка продолжить моргать несколько секунд. Время программы по умолчанию 20 мин.
-  АВТО программа №1  
Нажатие на кнопку запускает автоматическую программу №1. Соответствующая подсветка загорится.
-  АВТО программа №2  
Нажатие на кнопку запускает автоматическую программу №2. Соответствующая подсветка загорится.
-  Разминающий массаж  
Нажатие на кнопку запускает автоматическую программу. Соответствующая подсветка загорится.
-  Массаж с вращением роликов  
Нажатие на кнопку запускает автоматическую программу. Соответствующая подсветка загорится.
-  Массаж Шиатцу  
В данной программе, нажатие активирует ручной режим, повторное нажатие регулирует ширину (средняя или широкая) и выключает программу. Соответствующая подсветка загорится.
-  Выбор массажной зоны  
В автоматической программе, нажатие включит ручной режим. Повторное нажатие выберет режим полной зоны охвата или определенного участка. Соответствующая подсветка загорится.
-  Массажные ролики - вверх  
Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить массаж и передвинуть ролики вверх. Отпустите кнопку и массаж продолжится.
-  Массажные ролики - вниз  
Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить массаж и передвинуть ролики вниз. Отпустите кнопку и массаж продолжится.
-  Прогрев с подсветкой  
Нажмите эту кнопку чтоб включить прогрев с подсветкой.
-  Вибрация  
Нажмите на кнопку несколько раз, чтобы выбрать: среднюю, сильную или выключить вибрацию. Соответствующая подсветка загорится.