


SENSA

Массажный пояс
RT-2011

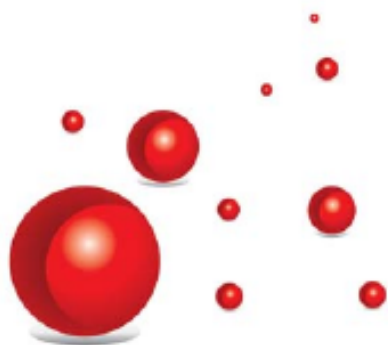

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Содержание

Меры предосторожности
Описание массажера
Инструкции по эксплуатации
Хранение и уход
Техническая спецификация
Гарантия

Меры предосторожности

Внимание!

1. Не используйте и не храните прибор во влажном или пыльном месте.
2. Не используйте прибор в помещении с температурой выше 40°C.
3. Не храните прибор на улице.

Противопоказания:

Следующим людям следует проконсультироваться с врачом прежде, чем использовать массажный пояс:

1. Людям, находящимся на специальном лечении;
2. Людям, имеющим травмы;
3. Людям с высоким давлением, сердечными заболеваниями, церебральным артериосклерозом, тромбозом сосудов головного мозга;
4. Беременным женщинам и женщинам в период менструации;
5. Людям, которые на протяжении долгого времени принимали гормоны;
6. Людям, страдающим хроническими заболеваниями;
7. Людям, страдающим от остеопороза;
8. Людям со встроенными в организм электронными медицинскими приборами.

Инструкции по использованию пульта управления:

- Не используйте пульт влажными руками. Не позволяйте воде или другим жидкостям попадать на пульт управления.
- Не бросайте пульт на землю.
- Не тяните провод питания.
- Не располагайте на пульте тяжелые предметы

Советы по применению:

- Не используйте массажный пояс совместно с другими электрическими приборами.
- Не используйте массажный пояс в качестве лечения.
- Запрограммированное время работы — 10 минут. Функция защиты от перегрева может автоматически отключить прибор по истечению установленного времени.
- Не располагайте на приборе тяжелых предметов, это может привести к поломке.
- Массажный пояс может быть использован только одним человеком одновременно.
- Подросткам (до 18 лет) запрещено использовать массажный пояс.
- Люди с отклонениями в умственном развитии могут использовать массажер только под присмотром.

Предупреждения!

1. Не засыпайте с работающим массажным поясом.
2. Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения или при плохом

- самочувствии.
3. Не тяните за провод питания.
 4. Перед использованием извлеките из карманов такие предметы, как: мобильный телефон, ключи и др.

В следующих случаях следует прекратить использование массажного пояса, выключить и отключить от питающей розетки:

1. На прибор или пульт управления пролита вода;
2. Повреждена наружная часть массажного пояса, и видны внутренние элементы, или повреждены внутренние элементы.
3. Вы чувствуете дискомфорт во время использования.
4. Произошел сбой функций или внезапное отключение прибора.
5. Произошло отключение электричества.

Установка и содержание

1. Используйте необходимое напряжение для подключения прибора.
2. Не подключайте провод и не тяните за провод влажными руками.
3. В случае возникновения повреждений провода питания или других частей не проводите ремонт самостоятельно. Прекратите использование и обратитесь в сервисную службу.

Описание массажера

Внешняя структура



Провод питания



Описание кнопок пульта управления



Кнопка питания: включает / выключает массажные функции

- Когда массажер выключен кнопка находится в режиме ожидания, световой индикатор горит. Нажмите эту кнопку один раз чтобы запустить автоматическую массажную программу номер 1.
- Нажмите кнопку еще раз чтобы выключить массаж.
- Время работы автоматической программы 15 мин, по истечении времени массажер выключится.



Выбор режима:

Три вида автоматических программ: программы 1, 2 и 3. Нажимайте эту кнопку, чтобы переключать по кругу программы.

- Программа 1: комбинация легкого и интенсивного воздействия
- Программа 2 интенсивность массажа меняется постепенно. Доступны 3 уровня настройки вибрации
- Программа 3: ручная программа. Доступны 6 уровней настройки вибрации



Кнопки регулировки интенсивности вибрации

Инструкции по эксплуатации

Подключение провода питания

1. Подключите провод питания к адаптеру.
2. Вставьте разъем адаптера в разъем массажного пояса.
3. Подключите провод к питающей розетке.

Способы массажа



Массаж живота



Массаж ягодиц



Массаж плеч и спины



Массаж бедер



Массаж рук

Пожалуйста, прикрепите пульт управления на боковую часть массажного пояса, когда он не используется.

Внимание!

Не позволяйте массажному поясу касаться обнаженных частей тела во время использования. Пояс следует одевать на одежду.

Хранение и уход

- Перед чисткой Отключайте прибор от питающей розетки.
- Используйте сухую и мягкую ткань для внешней очистки прибора.
- Во время хранения выключайте прибор и вынимайте вилку из питающей розетки, храните провод питания в сухом и чистом месте.
- Не позволяйте прибору находиться длительное время под прямыми солнечными лучами, не храните массажер в жарком месте.

Техническая спецификация

Название: Массажный пояс

Модель: RT-2010

Питание: 24 В

Потребляемая мощность: 25 Вт

Адаптер