


SENSA

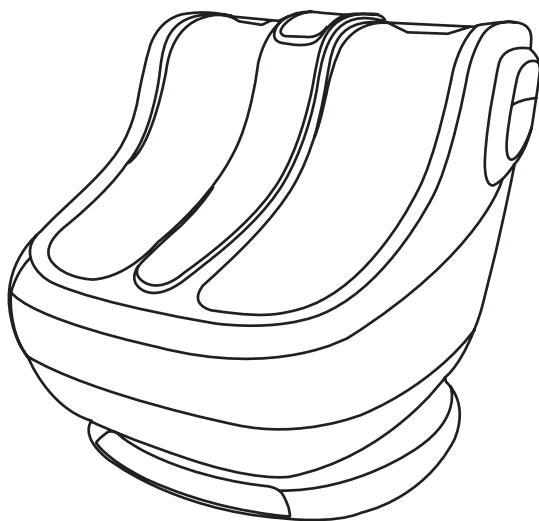

---

## МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ RT-1889

---

Руководство по эксплуатации

Мы благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Перед использованием, пожалуйста, прочтите инструкцию внимательно и уделите особое внимание мерам безопасности для надлежащего использования.

Следуйте инструкции и внимательно ознакомьтесь с содержанием.



## СОДЕРЖАНИЕ



---

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b> .....	4
<b>ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ</b> .....	6
Компоненты .....	6
Панель управления .....	7
Функции панели управления .....	8
<b>СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b> .....	9
Перед использованием .....	9
Управление .....	9
После использования .....	9
<b>УХОД И ХРАНЕНИЕ</b> .....	10
Чистка .....	10
Хранение .....	10
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b> .....	11
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b> .....	12
<b>ГАРАНТИЯ</b> .....	13




## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- > Перед использованием массажера, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, уделяя особое внимание пункту «Меры предосторожности».
- > Описанные меры предосторожности помогут Вам правильно использовать массажер.
- > Для правильного понимания уровня опасности, особенно важные вещи выделены пунктами «Внимание» и «Осторожно». Точно следуйте указаниям в инструкции.

 <b>ВНИМАНИЕ!</b>	Неправильное обращение может нанести травму пользователю.
 <b>ОСТОРОЖНО!</b>	Неправильное обращение может нанести повреждение продукту.



	Разборка и самостоятельный ремонт запрещены.
	Проверьте подключение питания.

### ВНИМАНИЕ!

	<p>Людам имеющим следующие отклонения или заболевания рекомендовано проконсультироваться с врачом перед использованием массажера.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Людам использующим электрические медицинские приборы, такие как кардиостимулятор.</li> <li>• Людам, которым врач запретил использование массажера.</li> <li>• Людам с онкологией, с сердечными заболеваниями, с острой болью.</li> <li>• Женщинам во время беременности и менструации.</li> <li>• Людам с остеопорозом.</li> <li>• Людам с заболеваниями кожи.</li> <li>• Людам с температурой от 38 градусов.</li> </ul>
	<p>Не позволяйте людям с ограниченными возможностями пользоваться массажером без присмотра.</p> <p>Не позволяйте детям пользоваться массажером.</p> <p>Нельзя пользоваться двоим людям одновременно.</p> <p>Не сгибайте, не скручивайте, не придавливайте и старайтесь не повредить провод питания.</p> <p>Не используйте массажер, если провод поврежден.</p> <p>Не позволяйте несовершеннолетним пользоваться массажером без присмотра.</p>
	Не нужно самостоятельно пытаться разобрать или починить массажер. Если есть неисправность, обратитесь в сервис-центра компании дилера.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ОСТОРОЖНО!

	<p>Не стоит использовать массажер более 15 минут.</p> <p>Не ставьте тяжелые предметы на массажер.</p> <p>Время работы массажера 15 минут.</p> <p>Не накрывайте массажер одеялом или подушкой во время использования, может привести к возгоранию.</p> <p>Пожалуйста, не вставайте на массажер во избежание поломки.</p> <p>Не трогайте панель управления мокрыми руками.</p> <p>Не храните массажер на улице или в холодном помещении.</p> <p>Запрещено окунать массажер в воду и другие жидкости для чистки.</p> <p>Если вы принесли массажер в помещение с холода, не используйте его в течение часа, дайте ему нагреться до температуры помещения, что бы избежать повреждений.</p> <p>Не используйте массажер одновременно с другими терапевтическими приборами.</p> <p>Люди не чувствительные к теплу должны быть в сопровождении человека с нормальным восприятием во время использования массажера.</p> <p>Массажер не предназначен для медицинского лечения.</p> <p>Пожалуйста, немедленно перестаньте использовать массажер, если обнаружили повреждение или неисправность (дым, запах горелого) во время массаже.</p> <p>Пожалуйста, используйте источник питания с подходящим напряжением.</p> <p>Осмотрите массажер на предмет повреждений перед использованием. Если обнаружите, обратитесь в сервис-центр компании дилера.</p> <p>Не используйте массажер во влажном помещении, для избежания удара током.</p> <p>Если вы почувствовали дискомфорт во время массажа, прекратите использование и обратитесь за консультацией к врачу.</p> <p>После использования, пожалуйста, отключите массажер от питающей розетки.</p>
	<p>Используйте массажер не ранее, чем через пол часа после еды.</p> <p>Не засыпайте во время использования массажера.</p> <p>Не используйте массажер в нетрезвом состоянии и при наличии физических дефектов вашего тела.</p> <p>Снимайте часы, браслеты, вытаскивайте все из карманов перед использованием массажера.</p> <p>Не используйте бензин и другие едкие жидкости для чистки массажера.</p> <p>Не оставляйте массажер рядом с продуктами горения и легковоспламеняющимися веществами.</p> <p>Не курите во время использования массажера, во избежание пожара.</p>


# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

## Компоненты

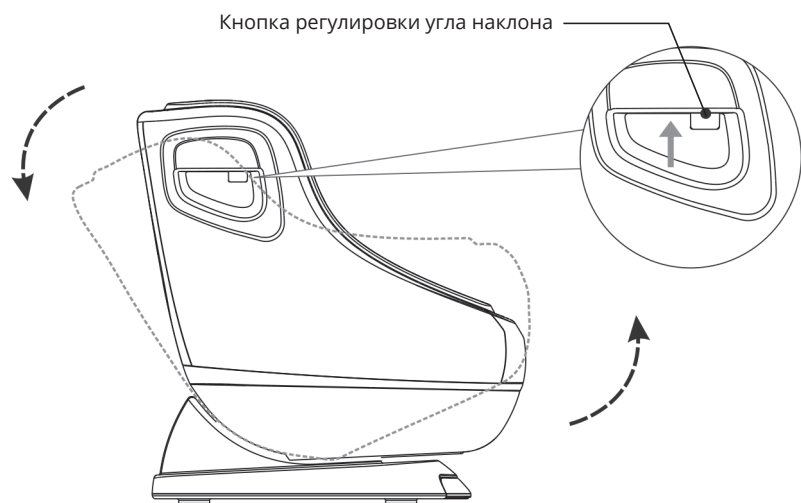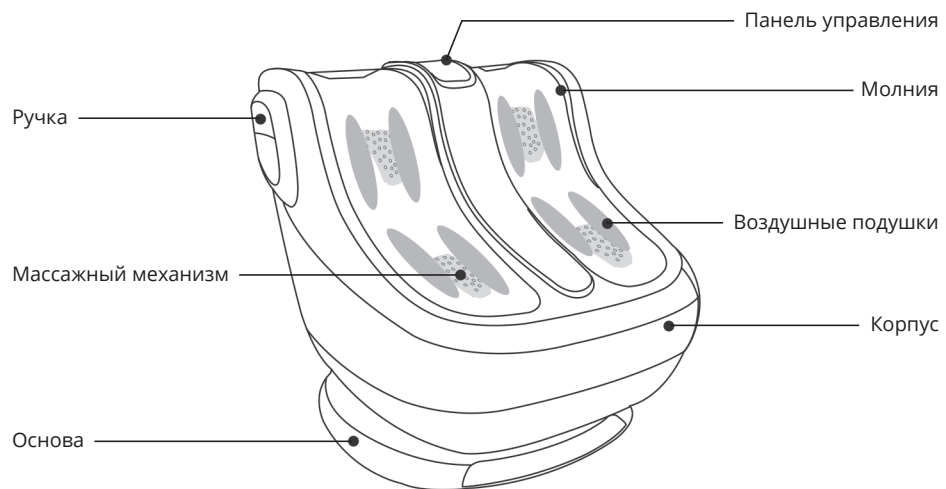

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

## Панель управления

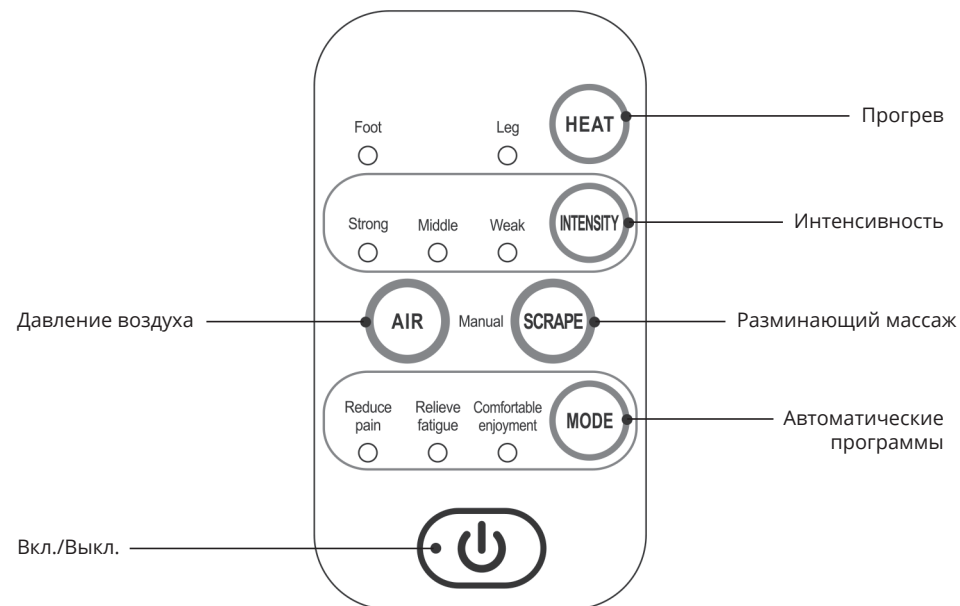

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- > Не допускайте попадания воды или других жидкостей на панель управления.
- > Не жмите на кнопку слишком долго, может сбить программу.
- > Не вставайте во время использования, не ставьте ничего тяжелого на массажер.
- > Не садитесь и не вставайте на массажер.
- > Во время перемещения массажера не тяните за провод питания.

## Функции панели управления



### Кнопка прогрева

Нажмите эту кнопку и запустится функция прогрева икр и стоп. Нажмите еще раз, что бы отключить прогрев.



### Кнопка регулировки интенсивности

Вы можете отрегулировать интенсивность разминающего массажа стоп/икр и воздушно-компрессионного массажа. Нажмите кнопку и выберите режим «Сильный», «Средний» или «Слабый». Индикатор выбранного режима загорится на панели управления.



### Кнопка воздушно-компрессионного массажа

Вы можете включить или отключить воздушно-компрессию. При нажатии на эту кнопку начнется воздушно-компрессионный массаж без разминания. Индикатор кнопки на панели управления будет попеременно медленно моргать, и скорость воздушной компрессии будет медленной. Нажмите еще раз, индикатор будет моргать быстрее и скорость компрессии тоже будет быстрее. Вы можете выбрать один из трех режимов нажатием кнопки, следя за индикатором.



### Кнопка разминающего Шиаци массажа

Вы можете включить или отключить разминающий массаж стоп/икр. При нажатии на эту кнопку начнется разминающий массаж без воздушной компрессии. Индикатор кнопки на панели управления будет попеременно медленно моргать, и скорость разминания будет медленной. Нажмите еще раз, индикатор будет моргать быстрее и скорость разминания тоже будет быстрее. Вы можете выбрать один из трех режимов нажатием кнопки, следя за индикатором.



### Кнопка автоматической программы

Вы можете выбрать одну из трех автоматических программ нажатием на эту кнопку: облегчение боли; снятие усталости; комфорт. По умолчанию стоит программа комфорт.



### Кнопка включения/выключения


После подключения питания, нажмите эту кнопку, чтобы включить массажер и активировать панель управления. Загорится индикатор. Нажмите кнопку еще раз и массажер выключится, индикатор погаснет. Рабочее время массажера 15 минут.

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- > Если массажер выключится во время массажа, отключите кнопку питания на основании массажера и отсоедините его от розетки.
- > Не помещайте в массажер руки, во избежание травмы.
- > Не позволяйте детям и животным играть с массажером.

## Подготовка к использованию


- > Поместите массажер на ровную поверхность.
- > Установите массажер на удаленном расстоянии от аудио и видео систем, таких как телевизор, радио, и т. п. оборудование, что бы не допустить никаких помех.
- > Используйте розетку с подходящим напряжением (100-240).
- > Включите кнопку питания.

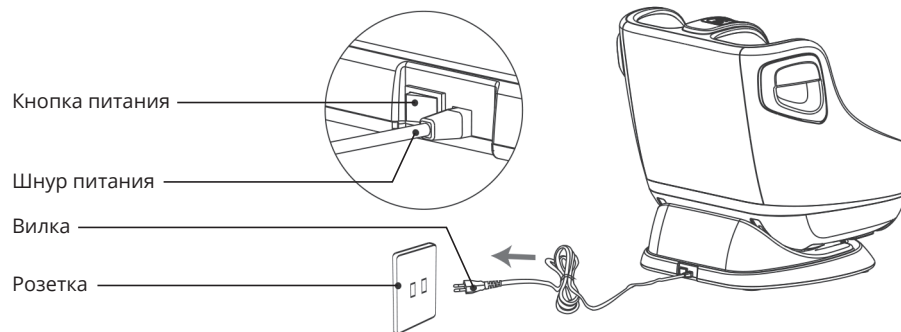

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- > Перед подключением, проверьте провод на предмет повреждений.
- > Не подключайте массажер мокрыми руками.

## Управление

- > Сначала сядьте в кресло, потом поместите ноги в массажер (как показано на рисунке справа).
- > Пожалуйста, включите кнопку «», начнется автоматическая программа.
- > Во время использования вы можете отрегулировать угол наклона массажера. Нажмите кнопку фиксирующую положение массажера, она находится справа на ручке. Нажмите и удерживайте кнопку пока не отрегулируете нужный угол наклона, отпустите кнопку и положение зафиксируется. Максимальный угол отклонения от начального 22 градуса (смотрите рисунок на странице 6).



## После использования

- > Выключите массажер нажатием на кнопку питания на панели управления.
- > Вытащите вилку из розетки.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

### Чистка

- > Перед очисткой убедитесь, что питание отключено и вилка вытащена из розетки.
- > Используйте мягкую ткань для протирания массажера и панели управления.
- > Намочите небольшим количеством слабо концентрированного моющего средства мягкую ткань для отмывки загрязнений с корпуса массажера, затем протрите сухой тканью.

#### ОСТОРОЖНО!

- > Не трогайте провод питания влажными руками.
- > Не используйте воду для очистки, не распыляйте воду или другие жидкости на массажер.
- > Не используйте коррозирующие жидкости для очистки массажера, испортите окрашенный слой на корпусе массажера.
- > Когда массажер мокрый, не снимайте подкладку, пусть массажер высохнет сам.

### Хранение

- > Убедитесь, что питание отключено и вилка вытащена из розетки.
- > Протрите пыль. Хранит массажер в чистом и сухом помещении.
- > Если вы не собираетесь пользоваться массажером долгое время, уберите его в пыленепроницаемую упаковку (собственную упаковочную коробку).

#### ОСТОРОЖНО!

- > Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на массажер. Не ставьте рядом с массажером предметов излучающих тепло. Может привести к обесцвечиванию краски и подкладки.

### Следует помнить

При ежедневном использовании массажера, проверяйте следующие показатели:

- > Запах горелого.
  - > Проверяйте температуру провода, он не должен сильно греться.
  - > Перебои питания, то есть, то нет.
- Другие проблемы.

#### ОСТОРОЖНО!

- > Если обнаружили какой-то из этих симптомов, перестаньте использовать массажер.
- > Выключите питание и вытащите вилку из розетки, обратитесь за помощью в сервис-центр компании дилера.
- > Не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить массажер.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	Проблема	Возможная причина	Решение
1	Громкий шум во время работы	Шумы допустимы при работе, это абсолютно нормально	Это не является дефектом продукта
2	Массажер не включается	Вилка не до конца вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
		Питание не включено	Включите кнопку питания
3	Прекратил работу во время массажа	Вышло время работы	Попробуйте заново через 15 минут

Если после попыток исправить неполадки описанные в этой инструкции, ничего не помогло, или у вас другие проблемы, не описанные здесь, обратитесь в сервис-центр компании дилера за помощью.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

Название:	Массажер для ног и стоп
Модель:	RT-1889
Напряжение:	220-240В
Частота:	50/60Гц
Питание:	60Вт

## ГАРАНТИЯ

---

Срок гарантии составляет 1 год с момента продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.

В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному на дату приобретения.

Изделие предназначено для личного пользования. Использование изделия в коммерческих или общественных целях является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

### Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- > небрежного хранения или транспортировки;
- > нарушение правил эксплуатации;
- > механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- > ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- > повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- > если в конструкцию изделия вносились изменения;
- > использования изделия не по назначению;
- > неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- > блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объёмы посторонних предметов.

Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

При обнаружении в товаре недостатков доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю производится в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» при условии сохранения товарного вида, потребительских свойств, упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара производится по адресу компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем, согласовывается с покупателем в рамках требований закона «О защите прав потребителей» и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».

# ГАРАНТИЯ

Наименование товара \_\_\_\_\_

Компания-продавец \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

Телефон продавца \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями ознакомлен.  
Претензий не имею.

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

**Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией «Нордбасс».**

Москва, ул. Новосуцевская, д. 15; т/ф: (495) 730 51 41

Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10; т/ф: (812) 244 11 91



---

[www.sensa-massage.ru](http://www.sensa-massage.ru)

---