

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Массажер для ног - гарантия 1 год

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера и прекращается при смене владельца массажера.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия не распространяется на массажеры, находящиеся в коммерческом использовании.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание. В случае невозможности провести необходимый ремонт, Sensa оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру на дату приобретения. В этом случае расходы по доставке массажера несет его владелец.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию массажера вносились изменения.
- использование изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых SENSA гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письменное уведомление получено SENSA в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности.

Оно должно сопровождаться документом, подтверждающим факт совершения покупки.

Имя покупателя _____

Дата покупки _____

Адрес доставки массажера _____

Город _____

Телефон _____

Наименование товара _____

Компания - продавец _____


Адрес Продавца _____

Город _____

Телефон _____

SENSA

массажер для ног
RT-1882

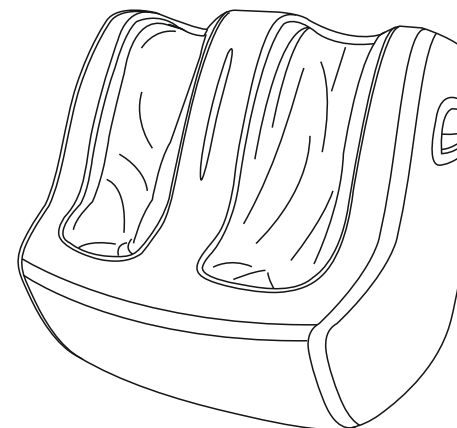

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку массажера для ног Sensa RT 1882. Для того чтобы массажер смог вам прослужить долгое время, ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей о время использования массажера.

▶ Содержание

Меры предосторожности-----	1
Описание массажера-----	3
Использование массажера-----	6
Уход и хранение-----	8
Спецификация-----	9

▶ Спецификация

Название: массажер для ног
Модель: RT 1882
Мощность: 24 В
Напряжение: 100 Вт

► Уход и хранение

Уход за массажером.

- ▶ Перед тем как протирать массажер и его пластиковые части, смочите тряпку в теплой воде и тщательно отожмите ее, после этого протрите сухой тряпкой.
- ▶ Для чистки блока питания используйте только сухую тряпку
- ▶ Для чистки платформы используйте тряпку смоченную в теплой мыльной воде, предварительно тщательно отжав ее. После того как протрете платформу влажной тряпкой, необходимо протереть ее сухой тряпкой.

Внимание

- ▶ Перед тем как протереть массажер, убедитесь, что он отключен от розетки. Не протирайте мокрой тряпкой блок питания. Не выключайте массажер из розетки мокрыми руками.
- ▶ Не используйте для чистки алкоголь и бензиносодержащие жидкости, а также химические реагенты.

Способ хранения

- ▶ После использования массажера, вытрите пыль с него, и отключите от розетки. Если вы планируете долго хранить массажер, накройте его чехлом.

Внимание

- ▶ Не храните массажер в местах попадания прямых солнечных лучей и в местах с высокой температурой, это может повредить его.

Помните

Перед тем, как вставить на массажер проверяйте:

- ▶ Не пахнет ли горелым.
- ▶ Не выключается ли массажер если вы дотрагиваетесь до провода.
- ▶ Не нагревается ли провод
- ▶ Другие неисправности.



Внимание



- ▶ Немедленно прекратите пользоваться массажером, если вы обнаружили хотя бы один признак неисправности.
- ▶ Немедленно отключите массажер из розетки и обратитесь к дилеру для ремонта.
- ▶ Внимание! только официальный дилер может ремонтировать массажер. Если ремонт будет производиться самостоятельно, либо человеком не относящимся к дилеру, гарантия будет не действительна.

► Меры предосторожности




Меры предосторожности.

- ▶ Перед использованием кресло внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.
- ▶ Следуйте мерам предосторожности во время использования массажного кресла.
- ▶ Обращайте повышенное внимание на места, где вы увидите значки “Осторожно” и “Внимание”

	Осторожно	Возможно получение травм.
	Внимание	Возможна поломка кресла.




	Разборка и самостоятельный ремонт запрещены.
	Обязательно следуйте инструкции.

Осторожно!

 ОБЯЗАТЕЛЬНО	Если у вас есть следующие отклонения или заболевания, перед использованием кресла проконсультируйтесь с врачом:									
	<table border="0"> <tr> <td>1. Люди использующие кардио стимуляторы.</td> <td>4. Женщинам во время беременности.</td> </tr> <tr> <td>2. Люди, которым запретил использование массажного кресла доктор.</td> <td>5. Болеющим остеопорозом.</td> </tr> <tr> <td>3. Люди с заболеванием сердца, опухолями и болями</td> <td>6. Людям с заболеваниями кожи.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. С температурой тела выше 38 градусов.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9. Женщинам с менструацией.</td> </tr> </table>	1. Люди использующие кардио стимуляторы.	4. Женщинам во время беременности.	2. Люди, которым запретил использование массажного кресла доктор.	5. Болеющим остеопорозом.	3. Люди с заболеванием сердца, опухолями и болями	6. Людям с заболеваниями кожи.		7. С температурой тела выше 38 градусов.	
1. Люди использующие кардио стимуляторы.	4. Женщинам во время беременности.									
2. Люди, которым запретил использование массажного кресла доктор.	5. Болеющим остеопорозом.									
3. Люди с заболеванием сердца, опухолями и болями	6. Людям с заболеваниями кожи.									
	7. С температурой тела выше 38 градусов.									
	9. Женщинам с менструацией.									
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ	Не позволяйте людям с ограниченными возможностями пользоваться массажным креслом без присмотра.									
	Не позволяйте детям играть с креслом.									
	Только один человек может использовать кресло одновременно.									
	Если электрический кабель поврежден, немедленно выключите кресло и обратитесь в службу поддержки.									
 НЕ РАЗБИРАТЬ	Не ломайте, не перекручивайте и не дергайте провода.									
	Дети не должны пользоваться массажным креслом.									
	Разбирать, чинить и ремонтировать кресло может только официальный сервисный центр, иначе гарантия на кресло аннулируется.									

Меры предосторожности

Внимание

 ОБЯЗАТЕЛЬНО	Максимальна продолжительность использования массажера не более 20 минут, и каждой части тела не более 5 минут.
	Устанавливайте массажер на твердую и ровную поверхность.
	Во время настройки не прикладывайте избыточную силу.
	Вынимайте провод из розетки только за вилку, не дергайте провод.
	Подключайте массажер только к сети 220 вольт, в противном случае вы можете его повредить.
	Перед тем как использовать массажер, проверьте его. Если вы заметите повреждения не используйте массажер и обратитесь к дилеру по поводу ремонта.
	Не нажимайте кнопки с излишней силой, мокрыми руками, а также не кладите на пульт никакие предметы.
	Вес человека пользующегося массажером не более 120кг.
	Не используйте терапевтические и массажные приборы совместно с массажером.
	Если во время массажа вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите пользоваться массажером и обратитесь к врачу.
Это массажер произведен только для домашнего использования.	
Если вы плохо переносите вибрацию, не пользуйтесь этим массажером.	
Всегда после использования массажера и перед его чисткой, вынимайте провод из розетки.	
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ	Чтобы не испытывать дискомфорт, не используйте массажер после еды.
	Не ставьте на виброплатформу вещи.
	Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
	Пожалуйста при чистке массажера не используйте чистящие средства, алкоголе содержащие средства, а также бензин, растворитель, керосин и т.д.
Не садитесь на платформу.	
Не курите массажере.	
 НЕ РАЗБИРАТЬ	Перед тем как протирать массажер, выньте провод из розетки, не вынимайте провод и не протирайте массажер мокрыми руками.
	Если вы не используете массажер, выключите его, также нажмите кнопку выкл на блоке питания и выньте провод из розетки.

Способ применения

Использование массажера

- ▶ Присоедините провод массажера к розетке



ВНИМАНИЕ

- ▶ Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь, что провод не поврежден.
- ▶ Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.

- ▶ После того, как вы вставите провод в розетку, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, находящуюся сзади массажера в положение ВКЛ. Дисплей и панель управления начнут подсвечиваться.
- ▶ Подберите удобное по высоте для себя кресло или стул, поставьте массажер рядом с креслом и поставьте в него ноги.



ВНИМАНИЕ

- ▶ Перед использованием массажера снимите с ступней все украшения, они могут нанести травмы.
- ▶ Не подпускайте детей к массажеру.

- ▶ Выберите необходимую массажную программу с помощью панели управления.

После использования

- ▶ Нажмите кнопку ВЫКЛ, находящуюся сзади массажера.
- ▶ Выньте провод из розетки.

▶ Способ применения

Перед использованием

- ▶ Ставьте массажер на ровную поверхность.
- ▶ Ставьте массажер на расстоянии одного метра от аудио-видео аппаратуры и компьютеров.




ВНИМАНИЕ

- ▶ Пожалуйста не вставляйте в массажер и не кладите на него тяжелые предметы.
- ▶ Не вставляйте руки в массажер.
- ▶ Не давайте детям и животным играть с массажером.




Способ перестановки

- ▶ Для перестановки массажера, возьмитесь руками за ручки, находящиеся по бокам массажера, как указано на картинке.

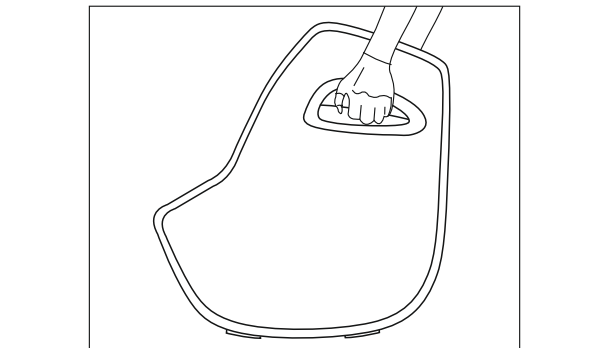

▶ Описание массажера


Массажер снаружи

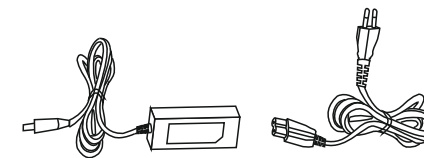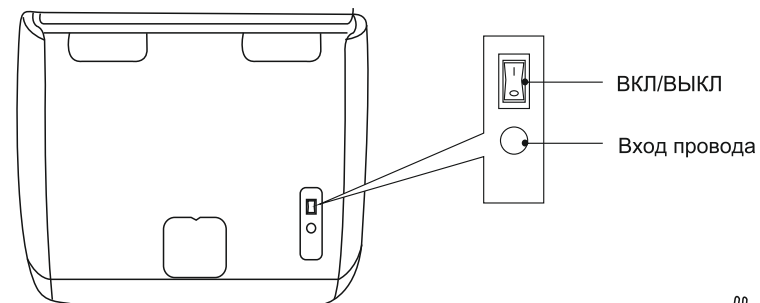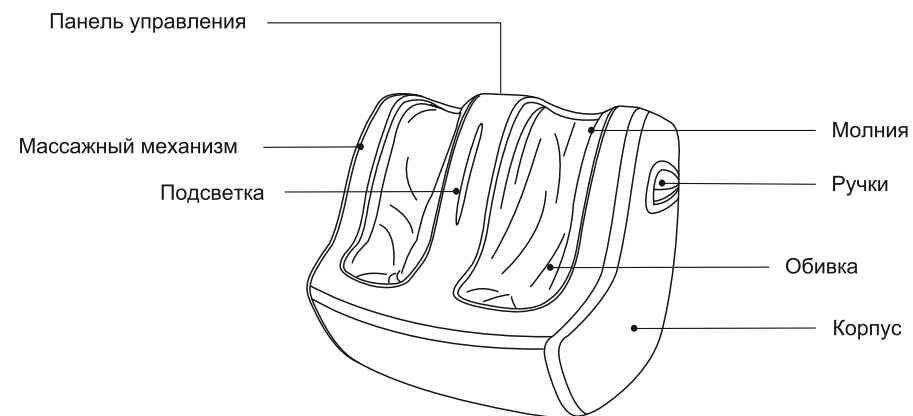


Адаптер

► Описание массажера

Массажер внутри

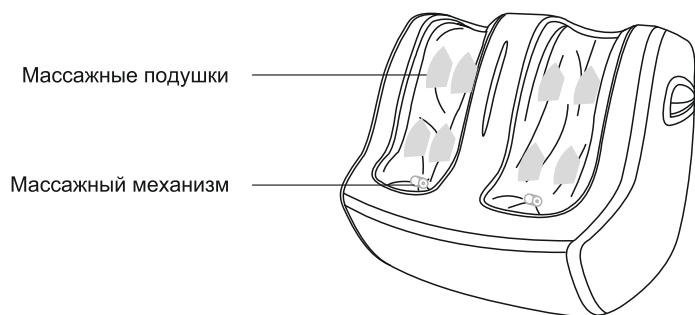

Панель управления

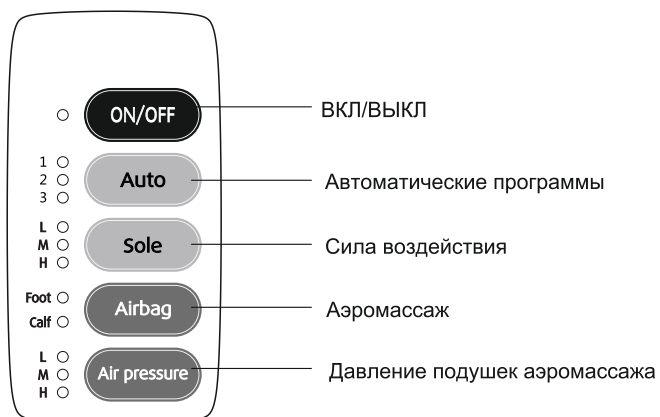

► Описание массажера

ON/OFF

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
Включает и выключает массажер. Время работы массажера 10 минут. После того как вы подключите провод массажера к розетки панель управления включится и будет подсвечиваться. Автоматически запустится режим автопрограмм.

Auto

Автоматические программы.
Всего в режиме автоматических программ есть три программы. Они переключаются нажатием кнопки автоматические программы.

Sole

Массажное воздействие.
С помощью этой кнопки вы можете переключать силу воздействия массажного механизма. Всего есть три уровня воздействия.

Airbag

Аэромассаж.
При нажатии кнопки вы запустите аэромассаж. Нажатие кнопки переключает массажные программы, которые массируют голени и икры.

Air pressure

Давление воздушных подушек.
Вы можете переключать силу воздействия аэромассажных подушек.

⚠ Внимание

- Не вставляйте на массажер и не кладите на него тяжелые предметы, это может его повредить.
- Не садитесь на массажер.
- Если в момент использования массажера в доме отключили электричество, немедленно выключите массажер из розетки.
- Не вставляйте руки в массажер.
- Не позволяйте детям и животным играть с массажером.
- Не запускайте массажер не вставляя в него ноги, это может повредить внутреннюю обивку.
- Не проливайте жидкость на массажер.