

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 1 года с момента продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.

В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному на дату приобретения. Изделие предназначено для личного пользования. Использование изделия в коммерческих целях является основанием для сокращения срока гарантийного обслуживания до 1 года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:


- небрежного хранения или транспортировки
- нарушение правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию изделия вносились изменения;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона.

Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» при условии сохранения товарного вида, потребительских свойств, упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара производится по адресу компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем, согласовывается с покупателем в рамках требований закона «О защите прав потребителей» и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».

Наименование товара _____
Компания – продавец _____
Адрес продавца _____
Тел. Продавца _____
Дата покупки _____
М.П. _____ (подпись)

Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией-продавцом.

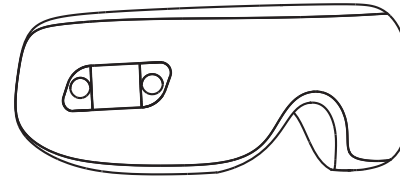

RT1025 | Массажер для глаз

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку нашего массажера. Прочитайте руководство перед использованием массажера. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ.....	3
Описание.....	3
Панель управления.....	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	5
Использование.....	5
Зарядка аккумулятора.....	6
УХОД И ХРАНЕНИЕ.....	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	9

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название продукта: Массажер для глаз

Модель: RT-1025

Номинальное напряжение: 5 В

Номинальная мощность: 5 Вт

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Пожалуйста, проверьте включена ли кнопка питания	Удерживайте кнопку питания, чтобы включить
	Проверьте заряд батареи	Зарядите массажер
	Проверьте, возможно закончилось время сеанса (15 минут)	Удерживайте кнопку питания, чтобы включить
Не заряжается	Пожалуйста, проверьте правильность подключения зарядного устройства	Подключите зарядное устройство так, чтобы штекер до конца был воткнут
Световой индикатор слишком темный или мигает	Массажер не достаточно заряжен	Пожалуйста, зарядите массажер
Давление воздуха слишком слабое		

Если после выполнения вышеуказанных мер, проблема осталась, пожалуйста, свяжитесь с сервис центром дилера для ремонта и технического обслуживания.

Меры предосторожности

- ▶ Не позволяйте детям играть с массажером, контролируйте процесс, если ребенок пользуется массажером.
- ▶ Пожалуйста, прекратите использование и обратитесь к врачу, если вы почувствуете себя некомфортно во время использования.
- ▶ Не используйте массажер, если он сломан или имеет поврежденное зарядное устройство, кабель питания или вилку.
- ▶ Пожалуйста, держите зарядное устройство в недоступном для детей месте.
- ▶ Не допускайте контакта массажера или зарядного устройства с водой, не используйте во влажном помещении.
- ▶ Не используйте дополнительные приспособления не рекомендованные компанией производителем.
- ▶ Не используйте в лечебных целях, только если это рекомендация врача.
- ▶ Не используйте массажер в нетрезвом виде и если чувствуете себя некомфортно.
- ▶ Не используйте массажер более 15 минут за один сеанс.
- ▶ Запрещается использовать массажер людям с заболеваниями глаз (глаукома, катаракта, отслоение сетчатки и др.), а так же при травмах и после хирургических операций.

Меры предосторожности

- ▶ Запрещается использовать массажер людям, которые используют кардиостимуляторы и другое медицинское электронное оборудование.
- ▶ Людям, страдающим раком, болезнями сердца, тяжелой гипертензией рекомендовано проконсультироваться с врачом, использовать массажер под наблюдением.
- ▶ Не используйте массажер, если у вас высокая температура.
- ▶ Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно починить массажер в случае неисправности. Обратитесь в сервис-центр компании дилера.
- ▶ Проверьте, соответствует ли напряжение техническим характеристикам массажера
- ▶ При отключения от электропитания тяните за вилку, а не за провод.
- ▶ Старайтесь не повредить шнур питания.
- ▶ Если зарядное устройство не работает, не пытайтесь самостоятельно починить его, пожалуйста, свяжитесь со службой сервиса компании дилера, чтобы заменить на новое.
- ▶ Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство, при необходимости заменить его, пожалуйста, обращайтесь в отдел обслуживания компании дилера.

Уход

- ▶ Очищайте от пятен только мягкой, слегка влажной губкой.
- ▶ При обильных загрязнениях используйте хлопчатую тряпку с небольшим кол-вом спиртосодержащего чистящего средства.



Внимание!

- ▶ Не используйте воду или другие жидкости для очистки.
- ▶ Пожалуйста, не разбирайте изделие если оно перестало работать. Обратитесь за помощью в сервисный центр компании дилера.

Хранение

- ▶ После использование, положите массажер в его упаковочную коробку, уберите в надежное, сухое, прохладное место.
- ▶ Пожалуйста, не ставьте на массажер тяжелые предметы, не допускайте контакта с водой и влагой, не роняйте массажер.




Внимание!


- ▶ Пожалуйста, не используйте массажер во время купания или в душе.
- ▶ Пожалуйста, не позволяйте детям играть с массажером.

Зарядка

- ▶ Откройте крышку сбоку на массажере, подключите кабель USB к зарядному устройству, а затем в разъем на массажере.
- ▶ Подключите зарядное устройство в розетку (100-240 ~, 50/60 Гц)
- ▶ Когда зарядное устройство будет подключено, загорится индикатор.
- ▶ Необходимо 3 часа для зарядки.

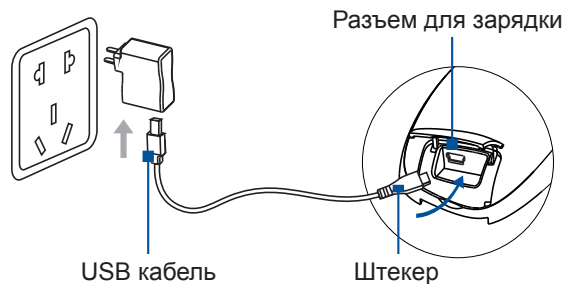


Описание

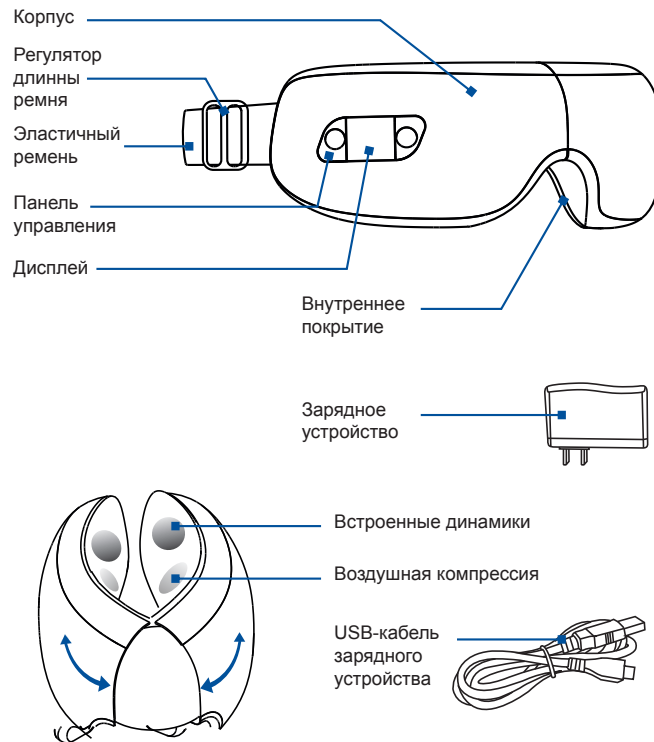

Внимание!

- ▶ Пожалуйста, не используйте массажер, когда он заряжается.
- ▶ Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство.
- ▶ Пожалуйста, не пережимайте шнур питания, чтобы не повредить его.

Панель управления

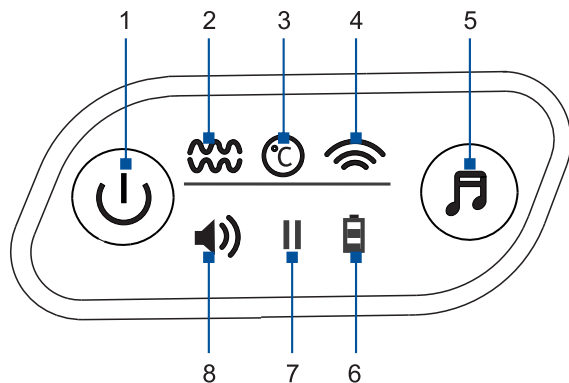

1. Кнопка питания / Переключение режимов
2. Световой индикатор давления воздуха
3. Световой индикатор ик-прогрева
4. Световой индикатор вибрации
5. Управление музыкой
6. Световой индикатор зарядки
7. Кнопка паузы для музыки
8. Световой индикатор для воспроизведения музыки

**Внимание!**

- ▶ Массажер автоматически выключается после 15 минут работы, если вы хотите продолжать использование, пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз.

Использование

**Выключатель**

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 2 секунд, чтобы включить воздушно-компрессионный массаж и ик-прогрев, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить воздушно-компрессионный массаж и функцию вибрации; Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить воздушно-компрессионный массаж, ик-прогрев, вибрацию, повторно нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию воздушно-компрессионного массажа, нажимайте повторно для выбора нужной функции. Чтобы выключить массажер нажмите и удерживайте в течении 2 сек.

**Кнопка управления музыкой**

Музыка заиграет, когда вы включите массажер. Нажмите и удерживайте, чтобы включать и выключать паузу, просто нажмите, чтобы переключить на следующую композицию.

Музыкальная библиотека (128 mb)

Включите массажер, подключите массажер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Вы можете добавить и удалить композиции из памяти массажера через компьютер. Одновременно будет идти зарядка.

Способ ношения

Приложите массажер к глазам внутренней стороной, затем натяните на затылок эластичный ремень.

**Внимание!**

- ▶ Пожалуйста, включайте массажер после того, как оденете его. Снимите контактные линзы перед использованием, а так же заколки для волос и другие посторонние предметы.