


## Руководство пользователя

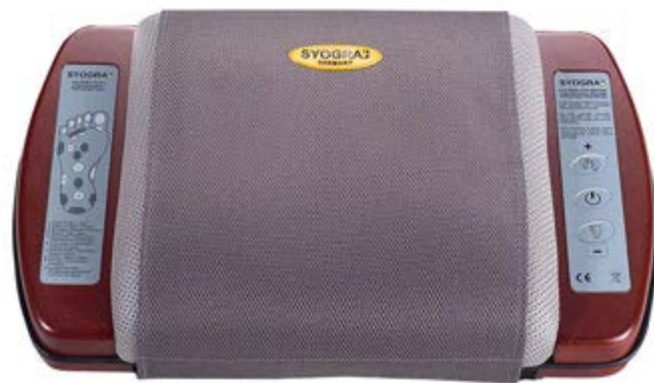

## Массажер ступней Syogra «KFM-001»

[www.luxtag.ru](http://www.luxtag.ru)

[www.nordbass.ru](http://www.nordbass.ru)

**Внимание! Прибор имеет специальное устройство защиты от перегрева. Отключение произойдет автоматически, если температура будет слишком высокой. Если такая ситуация произошла, отключите прибор, повторное включение рекомендуется производить не ранее, чем через 15 минут.**

### Противопоказания

В следующих случаях не следует применять массажер ступней:

1. При беременности
2. При заболеваниях ног и кожи
3. При повышенной температуре или наличие других инфекций
4. В случае перелома в прошлом
5. При сердечных заболеваниях
6. При остеопорозе
7. После недавней операции

**Массажер ступней не рекомендуется использовать детям до 16 лет и людям с ограниченными умственными и сенсорными способностями.**


### Инструкции по безопасности

Внимательно прочитайте инструкции по безопасности перед использованием прибора.

1. Разместите массажер на ровной, устойчивой и сухой поверхности.
2. Всегда отключайте прибор от питающей розетки после использования или перед очисткой, чтобы избежать повреждений или травм.
3. Используйте массажер согласно руководству по эксплуатации.
4. Используйте массажер только в помещении при нормальной температуре окружающей среды.
5. Не используйте массажер ступней при высокой температуре окружающей среды или в помещении с высокой влажностью (например, в ванной)
6. Не используйте прибор в пыльном помещении.
7. Применяйте массажер не более 15 минут за один сеанс, дайте прибору остыть после сеанса перед повторным запуском.
8. Прекратите использование, если обнаружите ненормальный запах или звук от массажера.
9. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен специалистом сервисной службы или квалифицированным электриком.

**Массажер ступней рассчитан только на частное использование, не рекомендуется для коммерческого использования!**

### Использование массажера ступней KFM-001

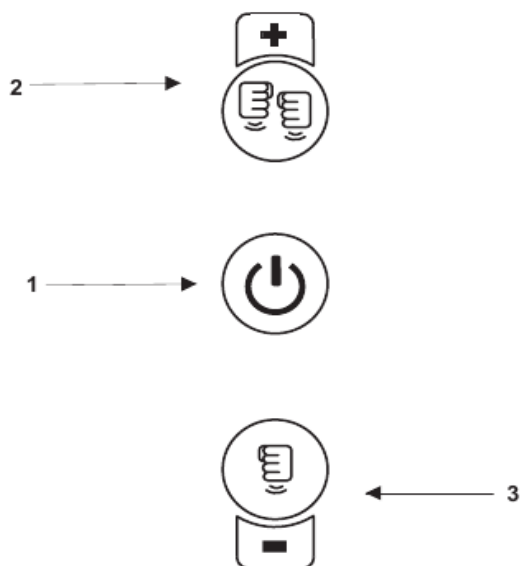

1. Включение/ выключение прибор

2. Увеличение интенсивности

3. Уменьшение интенсивности

Для запуска массажа нажмите клавишу 1 (ON/OFF).

Используйте клавиши 2 и 3 для регулировки желаемой интенсивности массажа.

Отключение автоматической программы произойдет приблизительно через 10 минут.

Для достижения оптимального эффекта, пожалуйста, двигайте ногами в горизонтальном и вертикальном направлениях во время массажа.

**Помимо ступней, прибор можно использовать для массажа других частей тела:**



**Спины**



**Ягодиц**



**Ног**

### **Спецификация**

Модель	КФМ-001
Название	Массажер ступней
Питание	220-240 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Вес	6,5 кг

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 1 год с момента продажи .

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки .

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.

В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец оставляет за собой право заменить изделие на новое , адекватное по стоимости неисправному на дату приобретения.

Изделие предназначено для личного пользования. При использовании изделия в коммерческих целях срок гарантийного обслуживания сокращается вдвое.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях :

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушение правил эксплуатации
- механических повреждений изделия , следов воздействия химических веществ ;
- ремонтных работ , производимых не сервисным центром ;
- повреждений или нарушений нормальной работы , вызванных животными или насекомыми ;
- если в конструкцию изделия вносились изменения ;
- использования изделия не по назначению ;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объёмы посторонних предметов ;

Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона.

При обнаружении в товаре недостатков доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю производится в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" при условии сохранения товарного вида, потребительских свойств, упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара производится по адресу компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем, согласовывается с покупателем в рамках требований закона "О защите прав потребителей" и Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом".

Наименование товара	<u>Массажер ступней KFM-001</u>
Компания – продавец	_____
Адрес продавца	_____
Тел. Продавца	_____
Дата покупки	_____

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись).

Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией-продавцом.